

XBlade



XBLADE

XBlade 是一款多功能筋膜刮痧儀，專為肌肉放鬆與疼痛舒緩而設計。結合先進的震動與加熱技術，有效提升按摩效果並促進血液循環；其人體工學設計帶來舒適握感，而堅固的結構則確保長時間穩定使用。

主要特色

- 三段震動強度：2000 / 3000 / 4000 RPM
- 三段加熱溫度：32° C / 37° C / 42° C
- 0.96 吋 OLED 雙色顯示螢幕
- 智慧感應觸控：自動進入休眠模式
- Type-C 充電介面 (5V = 0.7A 輸入)
- 輕巧便攜設計
- 多功能刮面設計：具凸面、凹面及按摩點狀結構

技術規格

項目	說明	項目	說明
型號：	XBlade-R10	震動強度：	Level 1 : 2000 RPM / Level 2 : 3000 RPM / Level 3 : 4000 RPM
材質：	鋅合金，表面電鍍處理	加熱溫度：	Level 1: 約 30°C ~ 32°C / Level 2: 約 35°C ~ 37°C / Level 3: 約 40°C ~ 42°C
電池容量：	2500mAh (18650 鋰電池)	本體：	3.7V \approx , 3.88W
充電方式：	Type-C 輸入 (5V \approx 0.7A)	尺寸：	160 x 54 x 24.79 mm
顯示螢幕：	0.96 吋 OLED 雙色顯示	淨重：	220g

使用說明



自動睡眠模式

若未偵測到手部接觸，裝置將於 30 秒後自動進入睡眠模式。若超過 1 分鐘未操作，則會自動關機。

1 電源開關

長按電源鍵 2 秒可開啟或關閉裝置。開機後，顯示螢幕將會亮起。

2 震動模式

短按電源鍵可在不同震動等級間循環切換 (0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0)。

3 加熱模式

加熱功能僅在裝置開啟後可使用。短按加熱鍵可在不同加熱等級間循環切換 (0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0)。


指示燈說明

LED 燈在通電時會亮起。每次按壓時，燈光會變換以顯示不同的亮度等級，從低亮度循環至高亮度。

震動模式	加熱模式	智慧傳感狀態
		使用中
		閒置
第一級	第一級	閒置 15 秒
第二級	第二級	閒置 30 秒
第三級	第三級	閒置 45 秒
沒有光 第一級 亮起一格 第二級 兩格亮起 第三級 三格亮起	沒有光 第一級 亮起一格 第二級 兩格亮起 第三級 三格亮起	閒置 60 秒
		關閉電源

充電與電池

恆亮燈表示裝置已開啟電源；閃爍燈則表示電量不足。
請使用 Type-C 充電線 搭配 5V 變壓器。
充電時間約為 4 至 5 小時。
當電量充滿時，三個指示燈將會全亮。

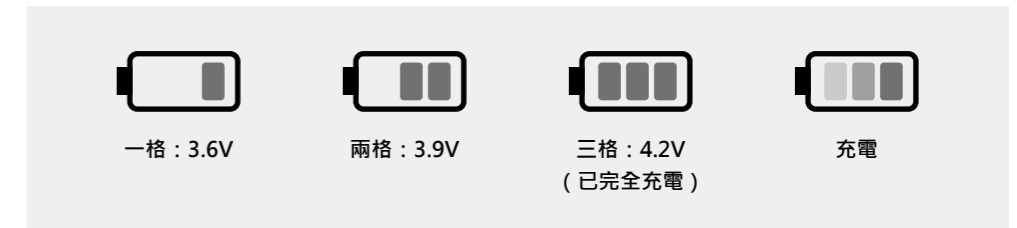

功能性刀片區域

XBlade 配備五種功能性邊緣設計，既能進行大範圍按摩，亦可施加精準壓力，全面支援全身肌肉舒緩與筋膜釋放。

• 圓頭邊緣

針對結節或觸發點施加集中壓力。

• 寬弧形邊緣

針對大肌群的寬幅按摩手法；有助釋放深層緊繃感。

• 深層組織邊緣

針對大型肌群的大範圍按摩手法；有助於釋放深層緊張感。

• 聚焦邊緣


針對緊繃區域的深層組織提供集中壓力。

• 精準邊緣

專為頸部、前臂及腳踝等小面積部位施加針對性壓力。



尺寸 (單位：毫米)

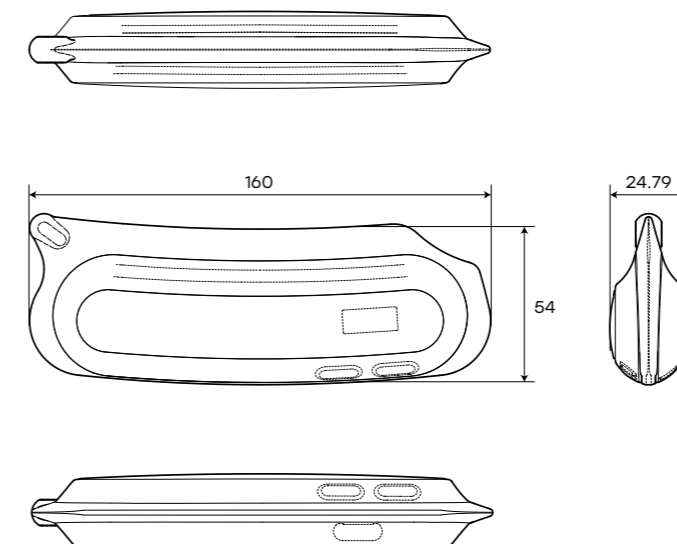

安全注意事項

- 請勿用於受傷或發炎的皮膚。
- 避免在單一區域長時間使用，以防過熱。
- 請遠離水源或過度潮濕環境。
- 請勿拆卸或改裝本裝置。
- 僅限使用隨附的 Type-C 充電線。

保養與維護

- 請使用乾布或微濕布清潔金屬刀片。
- 切勿將本裝置浸入水中。
- 存放於陰涼乾燥處。
- 避免摔落或施加過大壓力於裝置上。




警語

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
4. 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
5. 在電器報廢前應取出電池。

5.1 取出電池前電器應切斷電源。

5.2 產品報廢取出電池方式。

5.3 應安全地丟棄電池。

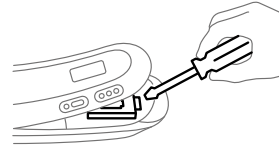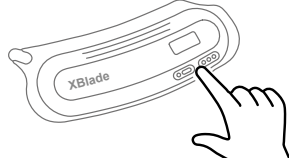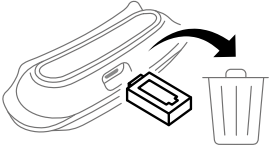

故障排除

問題	可能原因	解決方式
裝置無法開機	電量不足	充電後再使用
無震動反應	震動模式未啟動	按下電源鍵啟動震動模式
無加熱反應	加熱模式未啟動	按下加熱鍵啟動加熱模式
裝置自動關機	進入睡眠模式	握住裝置即可恢復使用

RoHS 聲明書

設備名稱 Equipment name : XBlade 智慧電動筋膜刀		型號 (型式) Type designation (Type) : XBlade-R10				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路部件 (PCB)	○	○	○	○	○	○
外殼 (Housing)	○	○	○	○	○	○
速線 (配件) (Cables)	—	○	○	○	○	○
電池包 (Charge Pack)	—	○	○	○	○	○
備考 1 : 「超出 0.1 wt%」及「超出 0.01 wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2 : 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3 : 「—」係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						